

Úvod
Ergonomická pracovní židle vyhovuje předpisům stanoveným v SS EN 1335-1 a SS EN 1335-2. Splňuje také normu Möbelfakta a MDR (EU) 2017/745.

Služba
Pokud potřebujete pomoc s montáží nebo provozem ergonomické pracovní židle, obraťte se na oddělení podpory nebo místního prodejce. Náš personál vám pomůže problém napravit. Před kontaktováním oddělení Support Design nebo distributora s dotazy ohledně vaší jednotky si prosím připravte sériové číslo ze štítku výrobku umístěného pod sedadlem.

Zamýšlený účel
Ergonomická pracovní židle je určena k prevenci a zmírnění problémů se zády uživatele během dlouhodobé statické práce a ke zmírnění dalších problémů se zády u uživatelů, kteří již mají problémy se zády, uvolněním zad. Přístroj má řadu speciálních funkcí, např. nastavitelnou výšku, funkci naklápění a otáčení, a může být vybaven příslušenstvím, např. opěrkou zad, opěrkou paží, opěrkou chodidel a nožním ovladačem.

Indikace
Zabraňuje a zmírňuje problémy se zády uživatele během dlouhodobé statické práce a zmírňuje další problémy se zády u uživatelů, kteří již mají problémy se zády, uvolněním zad.

Varování a rozpor

- Používejte pouze originální náhradní díly od Support Design.
- Židle používejte pouze k určenému účelu.
- Křeslo nikdy nepoužívejte na površích s rozdílnými úrovněmi.
- Nikdy neopravujte židli, když je používána
- Vždy dodržujte doporučené pokyny pro údržbu a čištění.
- Hrozí riziko smyku nebo stlačení prstů v pohyblivých částech.
- Pokud máte problémy s rovnováhou, nepoužívejte vyvažovací židle.
- V případě alergické reakce v přímém kontaktu s ergonomickou pracovní židli přestaňte židli používat a poraďte se s lékařem.

Bezpečnost
Výrobek by měl být používán pouze k určenému účelu, jinak by mohl způsobit zranění osob nebo výrobku. Před použitím je nutná nezbytná znalost produktu. Nesmí se používat žádné jiné příslušenství než to, které je uvedeno v této příručce. Opravy výrobku by měly provádět pouze pracovníci oddělení Support Design nebo zástupci pověřeného oddělení Support Design. Neoprávněné opravy a úpravy mohou vést ke ztrátě funkčnosti, zranění a ztrátě záruky.

Židle není schválena pro použití jako sedadlo spolujezdce v žádném dopravním prostředku a jako taková ji nelze použít.

Žádné chemické látky uvedené v seznamu látek SVHC agentury ECHA se nevyskytují v koncentracích nad 0,1 % hmotnostních.

Jakákoli závažná nehoda, ke které došlo uživateli v souvislosti s ergonomickým předsedou úkolů, by měla být nahlášena společnosti Support Design AB a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel sídlí.

Záruka
Zaručujeme, že váš nový produkt Support Design je bez vad materiálu nebo zpracování. Tato záruka se vztahuje pouze na produkty zakoupené přímo od autorizovaného prodejce pro návrh podpory nebo od autorizovaného prodejce pro návrh podpory. Tato záruka je platná po dobu 3-5 let a platí pouze pro původního kupujícího a končí, pokud svůj produkt převedete, prodáte nebo upravíte. Vezměte prosím na vědomí, že naše záruka se nevztahuje na:

- Běžné opotřebení
- Nesestavení, instalace nebo údržba výrobku v souladu s pokyny a pokyny k návrhu podpory (včetně použití zařízení s látkami, které mohou poškodit čalounění)
- Blednutí, změna barvy nebo přírodní variace kůže a tkaniny
- Odchytky vyskytující se v povrchových materiálech (například stálost barev nebo odpovídající zrna, textury a barvy na různých površích)
- Zneužití, zneužití nebo nehoda, např. skrábance nebo žby způsobené uživatelem.

Pokyny k čištění
Chcete-li ze svého křesla vylézt maximum, přečtěte si níže uvedené pokyny. Mějte prosím na paměti, že nedodržení těchto pokynů může mít vliv na vaši záruku.

Originální kůže
Vysávejte často měkkým kartáčem, v případě potřeby kůži očistěte pouze pomocí kožených čistících prostředků. Nevystavujte kůži silnému slunečnímu světlu ani přímému kontaktu s horkými povrchy.

Umělá kůže
Čalounění by mělo být pravidelně čištěno, aby se zachoval jeho povrch a zabránilo se usazování nečistot a bakterií.

Všechny skvrny, olej, mastnotu, inkoust, nečistoty nebo jiné znečištění je nutné okamžitě omýt, aby se snížilo riziko trvalých skvrn.

K odstranění skvrn z povrchu použijte jemný mýdlový roztok/detergent nebo speciální čistící prostředky na textilní plasty. Používejte společně s vlhkou houbičkou nebo hadříkem z mikrovláken. Většina zdravotnických dezinfekčních prostředků je také v pořádku, pokud jsou naředěny podle specifikace výrobce. Nikdy nepoužívejte laky, abraziva, rozpouštědla, dezinfekční prostředky na ruce, chloridy, voskové leštidla, silné čistící prostředky, roztoky na bázi xylenu nebo aceton, protože mohou způsobit okamžité trvalé skvrny na povrchu tkaného platu.

Kovové povrchy
Lze čistit pomocí standardních čistících prostředků. Horní část plynového sloupce musí být čistá a nečistoty musí být okamžitě odstraněny, aby nedošlo k trvalému poškození. Je-li horní část plynové pružiny poškozená (hluboké zářezy, nikoli povrchové skrábance), je nutné ji okamžitě vyměnit. Kolečka by se měla pravidelně vysávat a sbrat z nečistot.

Technické specifikace

Nosnost	130 kg
Výška sedadla	44–92 cm (v závislosti na variantě)
Hmotnost	7–17 kg (v závislosti na variantě)
Púdorys	50–61 cm (v závislosti na variantě)
Záruka	5 let

Plynové sloupce jsou k dispozici ve 3 různých výškách.

Pokyny k montáži
U křesla, které není dodáváno plně sestavené, postupujte podle kroků in obrázku 1-3:
1. Vložte pět (5) koleček do základny.
2. Vložte širokou část plynového sloupce do základny.
3. Umístěte sestavu sedadla na horní stranu plynového sloupce a několikrát zatlačte, aby se součástí zajistily.

Úpravy

Nastavení výšky
Obrázky 4-11 zobrazují nastavení výšky sedadla. Správné výšky sedátka je dosaženo, když je mezi horní částí těla a nohama otevřený úhel.

Nastavení výšky opěrky zad
Obrázky 12–15 zobrazují nastavení výšky opěrky zad. Opěrka zad by měla být nastavena tak, aby poskytovala dobrou bederní podporu.

Náklon sedadla
Obrázky 16-21 zobrazují nastavení náklonu sedadla. Sedadlo by mělo být mírně nakloněno dopředu, aby bylo dosaženo otevřeného úhlu kyčle.


Náklon opěrky zad
Obrázky 22–25 zobrazují nastavení náklonu opěrky zad. Opěrka zad by měla být nakloněna dopředu, aby byla zajištěna dobrá bederní opora.

Správná poloha sedadla
Obrázky 26–27 zobrazují správnou polohu sedadla.


Příslušenství
Ergonomická pracovní židle může být vybavena širokou škálou příslušenství, jak je znázorněno na obrázku 28.

Upozornění: Pokud je ergonomická pracovní křeslo vybaveno loketními opěrkami, je pro zajištění stability nutná základna o minimální délce 600 mm.


1-3

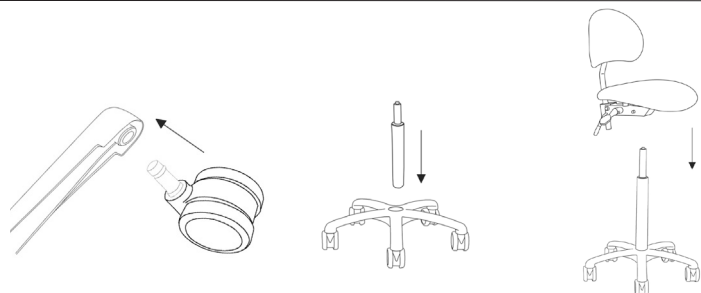


4-11

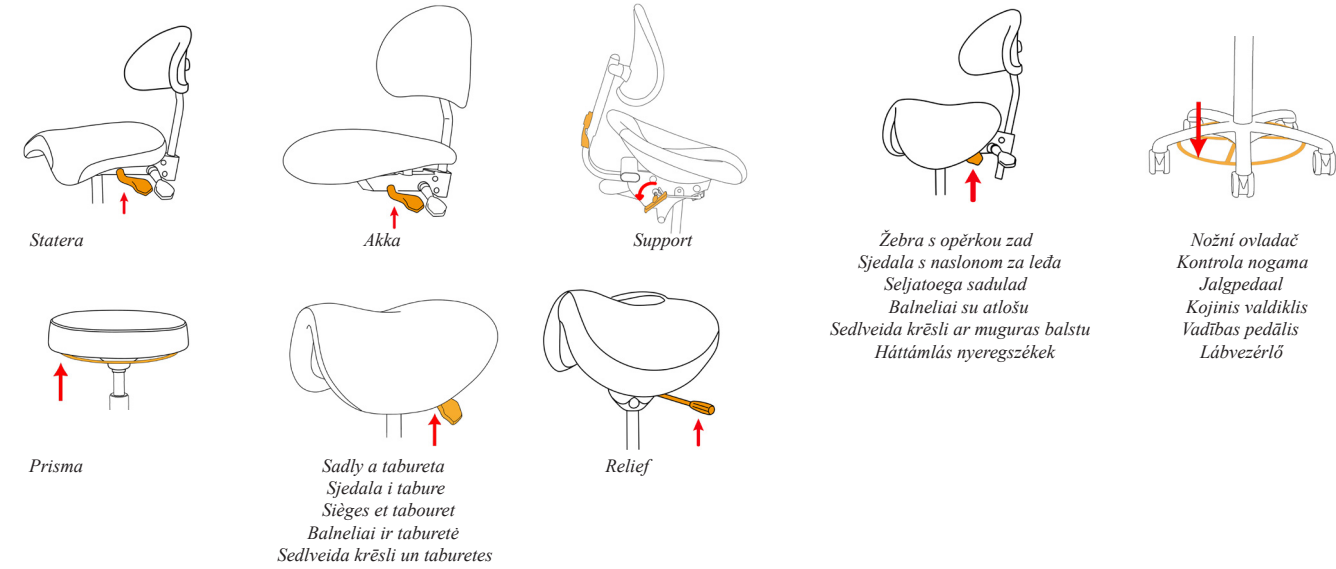


12-15

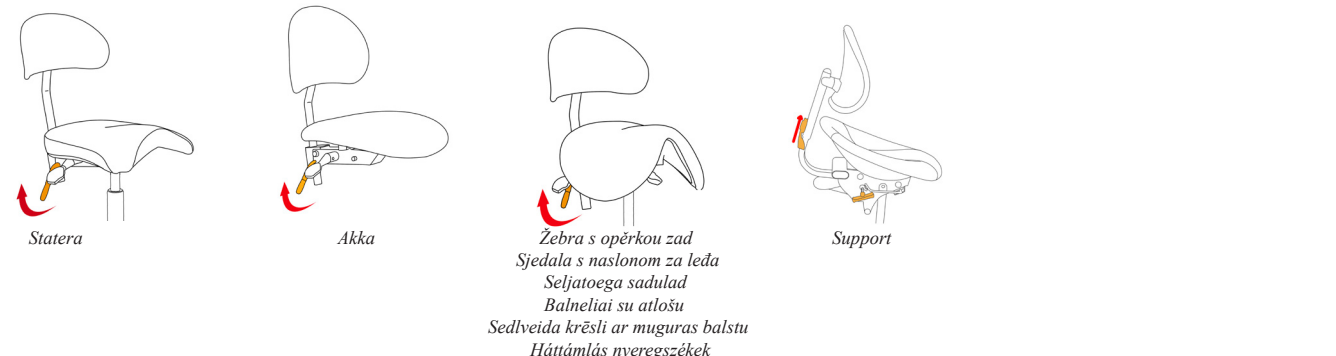


16-21

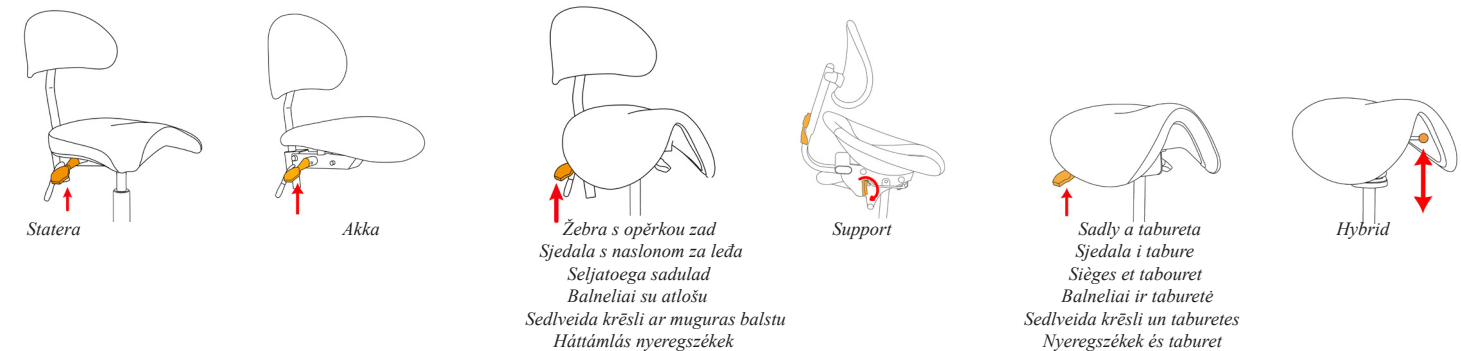


22-25

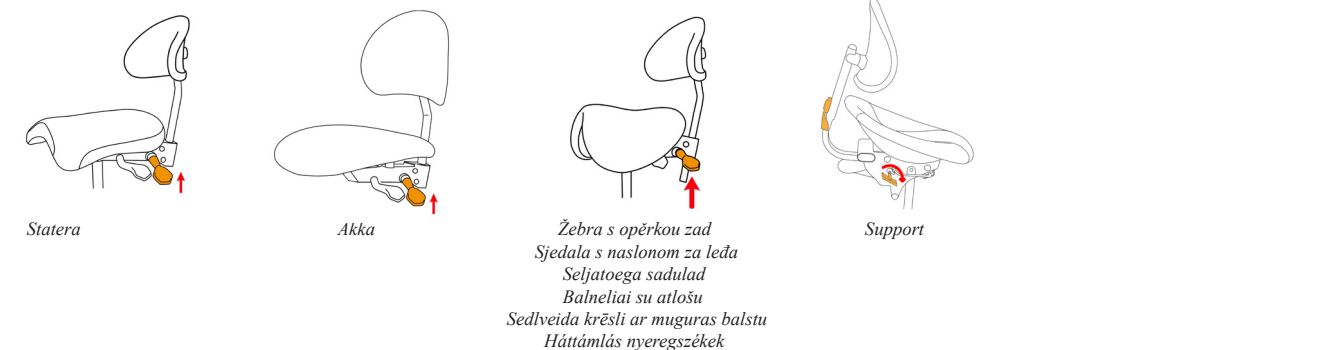

26-27

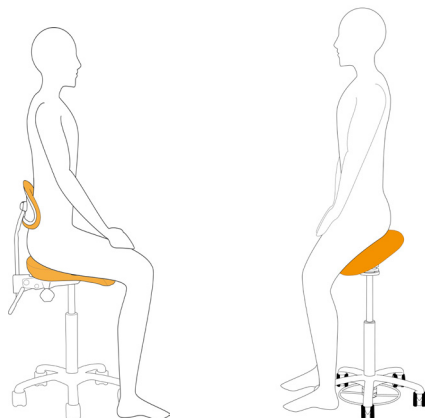

28

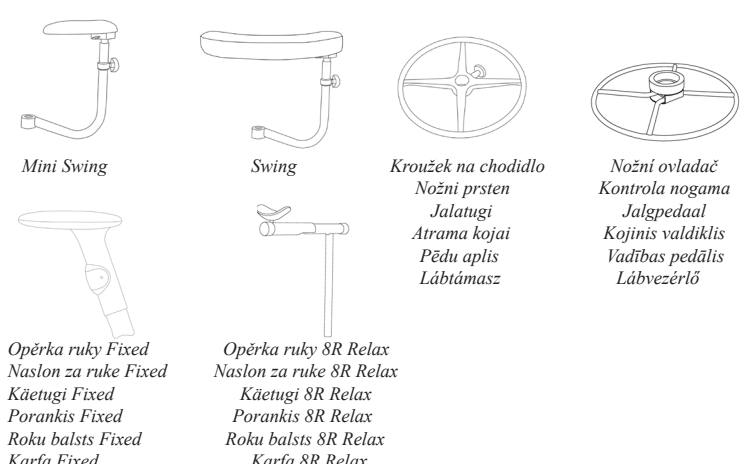

Uvod
Ergonomska radna stolica uskladena je s propisima utvrđenima u SS EN 1335-1 i SS EN 1335-2. Također je u skladu sa standardom Möbelfakta kao i MDR (EU) 2017/745.

Usluga
Ako vam je potrebna pomoć s sastavljanjem ili radom vaše ergonomske stolice za zadatke, obratite se dizajnu podrške ili lokalnom distributeru. Naše osoblje pomoći će vam u rješavanju problema. Molimo vas da serijski broj s naljepnice na proizvodu bude smješten ispod sjedala prije nego što se obratite tvrtki Support Design ili svom distributeru s pitanjima koja se odnose na vašu jedinicu.

Namjena
Ergonomska radna stolica namijenjena je sprečavanju i ublažavanju problema korisnika tijekom duljeg statičkog rada i ublažavanju daljnjih problema s leđima kod korisnika koji već imaju problema s leđima otpuštanjem leđa. Uredaj ima razne posebne značajke, npr. prilagodljivu visinu, funkciju nagiba i skretanja te može biti opremljen dodatcima, npr. naslonom za leđa, naslonom za ruke, naslonom za noge i nožnim upravljačem.

Indikacije
Sprječava i ublažava probleme korisnika tijekom produženog statičkog rada i ublažava daljnje probleme s leđima kod korisnika koji već imaju problema s leđima olakšavajući leđa.

Upozorenja i kontradikcije

- Koristite samo originalne rezervne dijelove iz dizajna podrške.
- Koristite stolicu samo za predviđenu svrhu.
- Nikada nemojte koristiti stolicu na površinama s razlikama u razini.
- Nikada ne servisirajte stolicu dok je u uporabi
- Uvijek se pridržavajte preporučenih uputa za održavanje i čišćenje.
- Opasnost od cijedenja ili stiskanja prstiju u pokretnim dijelovima.
- Nemojte koristiti stolice za ravnotežu ako imate problema s ravnotežom.
- U slučaju alergijske reakcije kada je u izravnom kontaktu s ergonomskom stolicom za zadatka, prestanite koristiti stolicu i posavjetujte se s liječnikom.

Sigurnost
Proizvod se smije upotrebljavati samo kako je predviđeno ili može prouzročiti ozljede osoba ili proizvoda. Potrebno je znati proizvod prije uporabe. Ne smije se koristiti nikakva dodatna oprema osim one navedene u ovom priručniku. Proizvod smije popravljati samo dizajn podrške ili predstavnik kojeg je ovlastio dizajn podrške. Neovlašteni popravci i izmjene mogu dovesti do gubitka funkcije, ozljede i poništavanja jamstva. Stolica nije odobrena za uporabu kao sjedalo suvozača u bilo kojemu prijevoznom sredstvu i ne smije se koristiti kao takva. Nema kemijskih tvari navedenih na ECHA-inom popisu kandidata za SVHC tvari u koncentracijama iznad 0,1 % masenog udjela. Svaki ozbiljan incident koji se dogodio korisniku u vezi s predsjednikom za ergonomski zadatak treba prijaviti tvrtki Support Design AB i nadležnom tijelu države članice u kojoj se korisnik nalazi.

Jamstvo
Jamčimo da vaš novi proizvod Support Design nema nedostataka u materijalu ili izradi. Ovo jamstvo primjenjuje se samo na proizvode kupljene izravno od Support Designa ili Support Designa Ovlaštenog maloprodajnog trgovca. Ovo jamstvo vrijedi 3-5 godina i vrijedi samo za originalnog kupca i prestaje vrijediti ako prenesete, prodate ili izmijenite svoj proizvod. Napominjemo da se naše jamstvo ne primjenjuje na:

- Normalno trošenje i habanje
- Nesastavljanje, postavljanje ili održavanje proizvoda u skladu s uputama i smjernicama potpornog dizajna (to uključuje uređaj tvari koje mogu oštetiti presvlaklu)
- Blijedenje, promjena boje ili prirodne varijacije koje se javljaju u koži i tkanini
- Varijacije koje se javljaju u površinskim materijalima (na primjer, otpornost boja ili uskladjivanje žitarica, tekstura i boja na različitim površinama)
- Zlouporaba, zlouporaba ili nezgoda, npr. ogrebotine ili rezovi koje uzrokuje korisnik.

Upute za čišćenje
Kako biste maksimalno iskoristili svoju stolicu, molimo vas da pročitate upute u nastavku. Imajte na umu da suzdržavanje od pridržavanja ovih uputa može utjecati na vaše jamstvo.

Prava koža
Vakuum često mekom četkom očistite kožu kada je to potrebno samo pomoću proizvođača za čišćenje kože. Ne izlažite kožu jakoj sunčevoj svjetlosti ili bliskom kontaktu s vrućim površinama.

Umjetna koža
Upholsteriju treba redovito čistiti kako bi se održala njezina površina i spriječilo nakupljanje prljavštine i bakterija.

Sve mrlje, ulje, masnoća, tinta, prljavština ili drugo zaprljanje moraju se odmah isprati kako bi se smanjio rizik od trajnih mrlja.

Koristite blagu otopinu sapuna/deterdžent ili posebna sredstva za čišćenje za tkaninu plastike kako biste uklonili mrlje s površine. Upotrebljavajte zajedno s vlačnom spužvom ili krpom od mikrovlakana. Većina sredstava za dezinfekciju u zdravstvu također je u redu za upotrebu, pod uvjetom da su razrijeđena u skladu sa specifikacijom proizvođača. Nikada nemojte koristiti lake, abrazivna sredstva, otapala, sredstva za dezinfekciju ruku, klorid, sredstvo za poliranje voska, sva sredstva za čišćenje, otopine na bazi kiseline ili aceton jer mogu uzrokovati neposredne trajne mrlje na površini tkane plastike.

Metalne površine
Može se čistiti standardnim proizvodima za čišćenje. Gornji dio plinskog kolone mora se održavati čistim, a prljavštinu treba odmah ukloniti kako bi se izbjeglo trajno oštećenje. Ako je gornji dio plinske opruge oštećen (dubok rezovi, a ne površinske ogrebotine), treba ga odmah zamijeniti. Castors treba redovito usisati i pokupiti iz prljavštine.

Techničke specifikacije

Kapacitet punjenja	130 kg
Visine sjedala	44 – 92 cm (ovisno o varijanti)
Težina	7 – 17 kg (ovisno o varijanti)
Otisak stopala	50 – 61 cm (ovisno o varijanti)
Jamstvo	5 godina

Plinski stupovi dostupni su u 3 različite visine.

Upute za sastavljanje
Za stolicu koja nije isporučena u potpunosti sastavljena, slijedite korake prikazane na slici 1 – 3:
1. Umestite pet (5) kotačića u bazu.
2. Umestite široki dio plinskog stupca u bazu.
3. Postavite sklop sjedala na vrh plinskog stupa i pritisnite nekoliko puta prema dolje kako biste pričvrstili komponente.

Podšavanje
Podšavanje visine
Na slikama 4 – 11 prikazano je podešavanje visine sjedala. Ispravna visina sjedala postiže se kada postoji otvoreni kut između gornjeg dijela tijela i nogu.

Podšavanje visine naslona za leđa
Slike 12 – 15 pokazuju podešavanje visine naslona za leđa. Naslon za leđa treba podestiti kako bi se pružila dobra lumbalna potpora.

Naginjanje sjedala
Slike 16 – 21, pokazuju podešavanje nagiba sjedala. Sjedalo treba lagano nagnuti prema naprijed kako bi se postigao otvoreni kut kuka.

Naginjanje naslona za leđa
Na slikama 22 – 25 prikazano je nagib naslona za leđa. Naslon za leđa treba nagnuti prema naprijed kako bi se pružila dobra lumbalna potpora.

Ispravan položaj za sjedenje
Slike 26 – 27 pokazuju ispravan položaj sjedenja.

Dodatna oprema
Ergonomska radna stolica može biti opremljena širokim rasponom dodatne opreme, prikazanim na slici 28.

Imajte na umu: Kada je ergonomska radna stolica opremljena naslonima za ruke, potrebna je baza od najmanje 600 mm kako bi se osigurala stabilnost.

